

ECO-Brace Light

abdukčná ortézy na dolné končatiny

Návod na použitie





Obsah

1. Informácie o výrobkoch.....	3
1.1 Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
1.2 ECO-Brace Light abdukčná ortéza na dolné končatiny	5
1.2.1 Účel použitia	5
1.2.2 Spôsob funkcie	5
1.2.3 Uchytenie nohy	5
1.2.4 ECO-Brace Light abdukčná dlahy na dolné končatiny	5
1.3 Príslušenstvo	6
1.3.1 ALFA- Soft podložka päty	6
1.3.2 ALFA-Flex doštičky na podošvy	6
2. Použitie	7
2.1 Založenie ortéz	7
2.2 Začervenania a otláčené miesta	8
2.3 Potenie nôh a vlhkosť	8
2.4 Odev	8
2.5 Nastavenia dlahy	8
2.6 Čistenie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny	8
2.7 Známe kontraindikácie a vedľajšie účinky pri použití ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny	8
2.8 Prispôsobenie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny	9
2.9 Školenia alebo špecifické kvalifikácie pre používateľov výrobku	9
2.10 Vyradenie z prevádzky	9
2.11 Hlásenie závažných udalostí	9
3. Adresy	9
3.1 Výrobca (názov, adresa, kontaktné údaje)	9
4. Údaje o výkone.....	10
4.1 Technické špecifikácie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny	10
4.1.1 Špecifické vlastnosti ECO-Brace Light abdukčnej dlahy na dolné končatiny	10
4.2 Technické špecifikácie uchytení nôh	11
4.2.1 Špecifické vlastnosti ALFA-Flex uchytení nôh	11
4.2.2 Špecifické vlastnosti COMFOOT bandážovej obuvi/uchytení nôh	12
4.3 Definícia symbolov a identifikačných farieb	13
5. Návody na montáž (len pre ortopedických technikov).....	14
5.1 Návod na montáž ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny	14

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE USCHOVAJTE NA NESKORŠIE VYHL'ADANIE

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržte všetky pokyny. Návod na použitie si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie. Ak tento produkt používajú iné osoby, poskytnite im tento návod na použitie.

1. Informácie o výrobkoch

1.1 Výstražné a bezpečnostné upozornenia



Skontrolujte správne spojenie abdukčnej dlahy na dolné končatiny s uchyteniami nôh pri každom založení ortézy.



Dbajte o to, aby noha sedela správne a pevne v uchytení nohy, inak môžu vzniknúť otlaky, pľuzgiere a sčervenania.



Uchytenia nôh by sa mali dvakrát denne 30 minút prevetrať.



V prípade silného potenia nôh sa musia viackrát denne vymeniť ponožky.



V pravidelných intervaloch kontrolujte, či sa skrutki na ortéze neuvoľnili.



Abdukčnú ortézu na dolné končatiny (jeden pár uchytení nôh a jedna abdukčná dlahy na dolné končatiny) môže prispôbovať len odborne vyškolený personál (ortopedický obuvník alebo ortopedický technik).



Ak by sa na ECO-Brace Light abdukčnej ortéze na dolné končatiny vyskytla chyba, obráťte sa na svojho ortopedického technika alebo ortopedického obuvníka.



Abdukčné dlahy na dolné končatiny nesmú narážať na tvrdé predmety (napr. pri skákaní dieťaťa na podlahe) Dlahy by sa mohla zlomiť!



Keď sa ortéza nepoužíva, musí sa uchovávať mimo dosahu detí.



Abdukčná ortéza na dolné končatiny sa môže nosiť len s ponožkami!



Uchytenia nôh nie sú bežecké topánky a majú sa nosiť len v kombinácii s dlahou!



Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, pretože by tieto mohli poškodiť plast a kožu.



Bezpečná montáž ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny môže a smie výlučne vykonávať len ortopedický obuvník alebo ortopedický technik. V žiadnom prípade nemeňte/neprestavujte nastavenia ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny, toto by mohlo viesť k vzniku recidívy! V prípade otázok a problémov týkajúcich sa nastavení sa obráťte na ortopedického obuvníka alebo ortopedického technika alebo detského ortopéda, ktorý ortézu predpísal. Za svojvoľné a neodborné prispôbenie spoločnosť Sameda neručí!

1.2 ECO-Brace Light abdukčná ortéza na dolné končatiny

1.2.1 Účel použitia

ECO-Brace Light abdukčná ortéza na dolné končatiny sa používa u bábätiok/malých detí s diagnózou idiopatickej vybočenej nohy podľa konzervatívnej terapie Dr. Ponsetiho.

Slúži na udržanie korekcie nohy po sadrovej redresii. Slúži na predchádzanie recidívy (opätovného zhoršenia) a nemá korekčný účinok.


Ortopéd predpíše ortézu na pokračovanie terapie. Ortopedický technik (alebo ortopedický obuvník) prispôsobuje podľa predpisu ortopéda ortézu u detí. Rodičia týchto detí ortézu denne zakladajú. Ortéza je opätovne použiteľný výrobok.

1.2.2 Spôsob funkcie

Abdukčná ortéza na dolné končatiny pozostáva z ECO-Brace Light abdukčnej dlahy na dolné končatiny a uchytenia nohy.

Existujú tri rôzne modely uchytenia nohy, ktoré sa hodia na ECO-Brace Light abdukčnú dlahu na dolné končatiny:

1. ALFA-Flex obuv/uchytienia nôh Henry
2. COMFOOT-Blue bandážová obuv/uchytienia nôh
3. COMFOOT-White bandážová obuv/uchytienia nôh

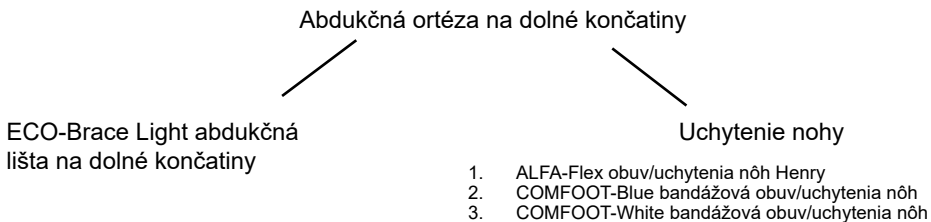

1.2.3 Uchytenie nohy

Príslušné uchytenie nohy slúži na fixáciu detských nôh, ktoré sa majú ošetrovať. S dlahou je spojená pomocou zacvakávacieho uzáveru.


1.2.4 ECO-Brace Light abdukčná dlahu na dolné končatiny

ECO-Brace Light abdukčná dlahu na dolné končatiny disponuje dvomi doštičkami na uchytenie topánok, ktoré sú pohyblivé v oboch smeroch, aby bolo možné nastaviť ortopédom definovaný terapeutický uhol (abdukčný uhol 0°–80°). Do doštičky na upevnenie topánky je pevne zapracovaná dorzálna extenzia 5°.

ECO-Brace Light abdukčná dlahu na dolné končatiny má plynulo prestaviteľnú dĺžku dlahy do šírky 30 cm a rastie počas celej doby terapie s dieťaťom.

Podstatné funkčné prvky ECO-Brace Light abdukčnej dlahy na dolné končatiny sú:

- a) 2 ramená dlahy
b) 2 doštičky na upevnenie topánok

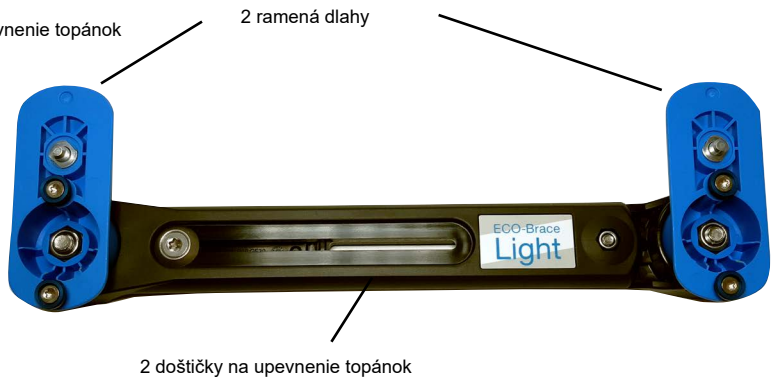

2 ramená dlahy ležia nad sebou a sú navzájom spojené 2 skrutkami. Na zmenu dĺžky dlahy sa skrutky najskôr uvoľnia pomocou priložených kľúčov, ramená dlahy sa presunú na požadovanú dĺžku a skrutky sa znovu dotiahnu.

Každé rameno dlahy ústi na vonkajšom konci do polkruhovitého ukončenia. Na každom z nich je upevnená vždy jedna platnička na upevnenie topánky pomocou inbusovej skrutky. Cez priehľadné okienko na ukončení je viditeľná meracia stupnica s údajmi uhla 0 – 80° a tak sa môže upevňovacia platnička na topánku otočiť do požadovanej uhlovej miery pre abdukciu.



Do doštičky na upevnenie topánky je pevne zapracovaná dorzálna extenzia 5°. Na hornej strane upevňovacej platničky na topánku sú umiestnené 2 vodiace drážky, na spodnej strane odpružený západkový čap. Tento slúži na spojenie s uchytením nohy (pozri 2.1).

1.3 Príslušenstvo

1.3.1 ALFA-Soft podložka päty

Das ALFA-Soft podložka päty sa zvlášť hodí na použitie s ALFA-Flex obuvou/uchyteniami nôh.

Táto podložka päty poskytuje nohe dodatočné držanie a zabraňuje, resp. odľahčuje otlaky. Je dostupná v dvoch veľkostiach, dá sa nalepiť do topánky a dá sa individuálne prstrihnúť.



1.3.2 ALFA-Flex doštičky na podošvy

ALFA-Flex doštičky na podošvy sú možné príslušenstvo k abdukčnej dlahy na dolné končatiny. Ich použitím dochádza k systémovej zmene ortézy. ALFA-Flex doštičky pod podošvy sa používajú v zriedkavých prípadoch, aby sa na spoločnosťou Sameda vyrobenú abdukčnú dlahu na dolné končatiny upevnili externé vyhotovenia uchytení nôh.

Použitie abdukčnej dlahy na dolné končatiny so špeciálnym vyhotovením nezodpovedá systému ortéz, ktorý sa tu popisuje. Preto preberáme ručenie len za nami poskytnuté príslušenstvo, teda platničky pod podošvy.

2. Použitie

2.1 Založenie ortéz

Ak ortézu dostanete od vášho lekára alebo ortopedického technika, tento nastaví uhly a dĺžku ortézy. Tieto nastavenia nemeňte, sú potrebné z terapeutického hľadiska!

1. Svojmu dieťaťu **bezpodmienečne** oblečte ponožky alebo pančuchové nohavice. Otvorte všetky uzávery topánky.



2. Vsuňte nohu dovnútra tak, aby bola päta celkom vzadu a dole. Skontrolujte správne nasadenie topánky pomocou priehľadného okienka.



3. Najskôr zapnite stredný remienok. Musí byť pevne utiahnutý, pretože drží pätu v správnej polohe.



4. Na vyrovnanie záhybov potiahnite zhora a na špičke ponožiek. Potom voľne zapnite ostatné remienky a kroky zopakujte s druhou topánkou.



5. Na upevnenie dlahy na topánkach nasadte zacvakávací uzáver do otvorov v podrážke a dlahu nasúvajte smerom k päte, pokiaľ uchytenie nezapadne.



2.2 Začervenania a otláčené miesta

Pokožka dočítať ešte nie je prispôsobená na nosenie topánok, teda je veľmi citlivá. Hoci sú topánky z mäkkého materiálu, môžu sa občas niektoré miesta otláčať alebo sa vytvoriť pluzgiere.

Červené škvrny alebo pluzgiere, zvlášť na zadnej strane päty poukazujú v normálnom prípade na to, že topánka nie je nasadená dostatočne pevne. Preto je veľmi dôležité, aby ste dbali na to, aby noha skutočne pevne sedela v topánke, pretože miernym posúvaním tam a späť v topánke môže veľmi rýchlo dôjsť k otláčeniam. Skontrolujte, či päta dole v topánke prilieha k podošve, pritom remienok utiahnite o ďalšiu dierku. Na červené škvrny na pokožke nikdy nepoužívajte emulziu. Emulzia môže problém zhoršiť.

Začervenanie pokožky, ktoré po vyzutí topánky na krátky čas veľmi rýchlo zmizne, nepredstavuje žiadny dôvod na obavy. **Ak je však začervenanie intenzívnejšie a trvajúcejšie alebo sa dokonca vytvorí pluzgier, čo najrýchlejšie vyhľadajte svojho ošetrojúceho lekára.** Ten rozhodne o ďalšom postupe. V prípade núdze sa ešte raz založí sadra, pri ktorej sa nechá voľné dotknuté miesto na pokožke, aby sa mohlo zahojiť. Pretože ak sa pri nosení vyskytnú pretrvávajúce problémy, môže to byť skorým príznakom recidívy.

2.3 Potenie nôh a vlhkosť

U detí so silným sklonom k poteniu nôh, môže neobvykle dlhá doba nosenia 23 hodín za deň spôsobiť, že topánky sú neustále vlhké. Keď používate topánky s podšívku z kože, môže v zriedkavých prípadoch dôjsť k tvorbe plesní na vnútornej strane kože, pretože táto je ošetrovaná rastlinnými látkami, aby sa predišlo alergickým reakciám. Preto vždy aj nezávisle od materiálu podšívky odporúčame:

- topánky dvakrát za deň vyvetrať na pol hodinu
- pri intenzívnom potení nôh viackrát za deň vymeniť ponožky

2.4 Odev

Uchytenia nôh sa musia zásadne nosiť s ponožkami alebo pančuchami. Prítom je dôležité dbať na predchádzanie otlakom. Odporúča sa používať ponožky s málo vláknami a švami na vnútornej strane a dbať o to, aby sa látka nezvlhila.

2.5 Nastavenia dlahy

ECO-Brace Light abdukčná dlaha na dolné končatiny sa spravidla na začiatku nastaví na 70° vonkajšej rotácie (abdukcia) pre vybočenú nohu a 40° pri nepostihnutej nohe. Dorzálna extenzia – teda ohnutie chodidla k holenej kosti je určené nastavením dlahy na 5°. Dĺžka ortézy by mala byť trochu väčšia ako šírka pliec vášho dieťaťa.

2.6 Čistenie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny

Abdukčná dlaha na dolné končatiny sa dajú bez problémov čistiť vodou a mydlom. Dezinfekcia nie je povinná. Ak napriek tomu použijete sprej na dezinfekciu alebo iné agresívne čistiace prostriedky, mohli by narušiť materiál.

2.7 Známe kontraindikácie a vedľajšie účinky pri použití ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny

Absolútna kontraindikácia nie je úplne vykonaná sadrová redresia, predovšetkým, keď ešte existuje plantárna flexia nohy. Noha nesedí správne v topánke a dorzálna extenzia nastavená na dlahu nemôže plniť svoj účel (prevencia kónskej nohy).

Relatívne kontraindikácie sú viacnásobné obmedzenia u ošetrovaných detí. Tieto vopred stanoví príslušný ošetrojúci lekár príslušného kompetenčného centra na ošetrovanie vybočenej nohy podľa Ponsetiho.

Ako vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť pluzgiere a začervenania. V tomto prípade by sa mali rodičia obrátiť na príslušného ortopedického technika.

Ďalšie vedľajšie účinky nie sú známe.

2.8 Prispôsobenie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny

Prispôsobenie príslušnej abdukčnej ortézy na dolné končatiny môže vykonávať výlučne osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená. To sú ortopedický technici alebo ortopedický obuvníci.

2.9 Školenia alebo špecifické kvalifikácie pre používateľov výrobku

Pri prispôsobení ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny sa uskutoční poučenie rodičov a ošetrovaných detí o obsluhu zo strany ortopedického technika/obuvníka a ošetrojúceho lekára.

Kvalifikácia ortopedického technika/obuvníka by malo byť ukončené odborné vzdelanie v odbore. Ortopedický technik/obuvník by si mal starostlivo prečítať návod na použitie Sameda.

2.10 Vyradenie z prevádzky



Bezpečnú likvidáciu výrobku vykonajú rodičia alebo aj ortopedický technik. Výrobok sa môže podľa miestnych predpisov likvidovať s komunálnym odpadom.

2.11 Hlásenie závažných udalostí



Všetky závažné udalosti (prípady) vyskytujúce sa v súvislosti s použitím výrobku sa musia ohlásiť výrobcovi (pozri kapitolu 3), ako aj úradu zodpovednému za kontrolu zdravotníckych výrobkov v sídle používateľa.

3. Adresy

3.1 Výrobca (názov, adresa, kontaktné údaje)

Sameda GmbH
Am Petersberg 36
29389 Bad Bodenteich

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

E-mail: info@semeda.de

Web: www.semeda.de

4. Údaje o výkone

4.1 Technické špecifikácie ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny

4.1.1 Špecifické vlastnosti ECO-Brace Light abdukčnej dlahy na dolné končatiny

Názov výrobku	ECO-Brace Light abdukčná dlaha na dolné končatiny
Číslo výrobku	EC 0500 -002
Použitie s:	Uchytenia nôh: ALFA-Flex obuv/uchytenia nôh Henry COMFOOT-Blue bandážová obuv/uchytenia nôh COMFOOT-White bandážová obuv/uchytenia nôh
Účel použitia	Ako systém ortézy s uchyteniami nôh: ECO-Brace Light abdukčná ortéza na dolné končatiny sa používa u bábätiiek/malých detí s diagnózou idiopatickej vybočenej nohy podľa konzervatívnej terapie Dr. Ponsetiho. Slúži na udržanie korekcie nohy po sadrovej redresii. Slúži na predchádzanie recidívy (opätovného zhoršenia) a nemá korekčný účinok.
Indikácia	Na ošetrenie idiopatickej vybočenej nohy
Terapeutický princíp činnosti	Fixácia nohy na predchádzanie recidívy pri vybočených nohách
Skupina pacientov	Bábätká/najmenšie deti/deti vo veku 0 – 5 rokov
Veľkosť/šírka	Dĺžka dlahy do 30 cm
Farba	Čierna/modrá
Materiál	Umelá hmota
Znaky vybavenia	
Nastavenie abdukčného uhla	Rozsah od 0 do 80°
Nastavenie dorzálnnej extenzie	Priložená na 5°
Zacvakávacie uzávery na prispôsobenie uchytení nôh	X
Varianty dlahy	
---	---
Doplnky/príslušenstvo k výrobku	
ALFA-Flex doštičky na podošvy	X
Číslo výrobku	ET 0700-003

4.2 Technické špecifikácie uchytení nôh

4.2.1 Špecifické vlastnosti ALFA-Flex uchytení nôh

Názov výrobku	ALFA-Flex obuv/uchytenia nôh Henry
Číslo výrobku	AL 1411 veľkosť strana
Použitie s:	ECO-Brace abdukčná dlahu na dolné končatiny
Účel použitia	Ako systém ortézy s abdukčnou dlahou na dolné končatiny: Abdukčná ortéza na dolné končatiny sa používa u bábätiiek/malých detí s diagnózou idiopatickej vybočenej nohy podľa konzervatívnej terapie Dr. Ponsetiho. Služi na udržanie korekcie nohy po sadrovej redresii. Služi na predchádzanie recidívy (opätovného zhoršenia) a nemá korekčný účinok.
Indikácia	Na ošetrovanie idiopatickej vybočenej nohy
Terapeutický princíp činnosti	Fixácia nohy na predchádzanie recidívy pri vybočených nohách
Skupina pacientov	Bábätká/najmenšie deti/deti vo veku 0 – 5 rokov
Veľkosť	070-210 (dĺžka nohy v mm)
Farba	modrá
Materiál	Koža + textil
Znaky vybavenia	
Zacvakávací uzáver k dlahe	X
Remienok s trňmi	--
Suché zipsy	3
Doplňujúce informácie o výrobku	
Podložka päty ALFA-Soft 1: Malá, pre veľkosti topánok 70 – 100, č. výrobku: AL 1700-001	X
Podložka päty ALFA-Soft 2: pre veľkosti topánok od 110, č. výrobku: AL 1700-002	X

4.2.2 Špecifické vlastnosti COMFOOT bandážovej obuvi/uchytení nôh

Názov výrobku	COMFOOT-White bandážová obuv/ uchytenia nôh	COMFOOT-Blue bandážová obuv/uchytenia nôh
Číslo výrobku	CW 1833 veľkosť strana	CB 1811 veľkosť strana
Použitie s:	ECO-Brace Light abdukčná dlahá na dolné končatiny	
Účel použitia	<p>Ako systém ortézy s abdukčnou dlahou na dolné končatiny: Abdukčná ortéza na dolné končatiny sa používa u bábätiiek/malých detí s diagnózou idiopatickej vybočenej nohy podľa konzervatívnej terapie Dr. Ponsetiho.</p> <p>Služi na udržanie korekcie nohy po sadrovej redresii. Služi na predchádzanie recidívy (opätovného zhoršenia) a nemá korekčný účinok.</p>	
Indikácia	Na ošetrovanie idiopatickej vybočenej nohy	
Terapeutický princíp činnosti	Fixácia nohy na predchádzanie recidívy pri vybočených nohách	
Skupina pacientov	Bábätká/najmenšie deti/deti vo veku 0 – 5 rokov	
Veľkosť	070-180 (dĺžka nohy v mm)	070-180 (dĺžka nohy v mm)
Farba	biela	modrá
Materiál	koža, neoprén a lycra	koža, neoprén a lycra
Znaky vybavenia		
Zacvakávací uzáver k dlahu	X	X
Remienok s trými	3	1
Suché zipsy	--	2
Doplňujúce informácie o výrobku	-	

4.3 Definícia symbolov a identifikačných farieb

V návode na použitie a na výrobku sa používajú nasledujúce symboly:



POZOR: Tento symbol označuje výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia v návode na použitie.



DODRŽIAVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE: Tento symbol odkazuje na nutnosť pre používateľa, aby sa riadil návodom na použitie.



ČÍSLO VÝROBKU: Zobrazuje číslo výrobku výrobcu, takže je možné identifikovať zdravotnícku pomôcku.



ČÍSLO ŠARŽE: Zobrazuje číslo dávky výrobcu, takže je možné identifikovať individuálnu zdravotnícku pomôcku.



DÁTUM VÝROBY: Zobrazuje dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená.



ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA Symbol toho, že výrobok je zdravotnícka pomôcka.



VÝROBCA: Zobrazuje výrobcu zdravotníckej pomôcky podľa nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.

5. Návod na montáž (len pre ortopedických technikov)

5.1 Návod na montáž ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolnú končatinu

NÁVOD NA MONTÁŽ ECO-Brace Light pre ortopedického technika

Ortéza na zlomeninu nohy na dodatočné ošetrovanie idiopatickej vybočenej nohy v rámci terapie Ponseti.

Odporúčaná doba ošetrovania: od posledného zloženia sadry do 4./5. roka života dieťaťa.



Obsah balenia:

ALFA-Flex alebo COMFOOT-Blue topánka/nožné upevnenia inbusový kľúč 4/5 mm, kľúč torx TX10/20 ECO-Brace Light ortéza na zlomeninu nohy

Dôležité informácie:

Ortéza: Na použitie na dobu terapie max. 5 rokov. Celková životnosť: 8 rokov.

Topánky: životnosť 8 rokov

Rok výroby môžete zistiť podľa prvých dvoch číslic seriového čísla.

Skladovanie: Nemrznuce miesto, chránené pred svetlom, stredne vysoká vlhkosť vzduchu. Čistenie: Čistite len navlhčenou handričkou, nepoužívajte ostré čistiace prostriedky



Pozdĺžne nastavenie ortézy:

- Variabilná dĺžka 200 – 290 mm
- Uvoľnite 2 skrutky hore a dole na mostiku ortézy (kľúč torx TX20)
- Dĺžku ortézy nastavte minimálne(!) na šírku pleca dieťaťa
- Pevne dotiahnite samoistiacu skrutku.



Nastavenie uhla zlomeniny:

- Uvoľnite skrutku na spodnej strane ortézy o štvrt otočenia (inbusový kľúč 4 mm).
- Modrú upínaciu dosičku topánky postupne otáčajte smerom von a pri zodpovedajúcom počte stupňov (všetky sú v rezore) nechajte zapadnúť (Ponseti odporúča 70° pri vybočenej nohe, 40° pri zdravej nohe).
- Pevne dotiahnite samoistiacu skrutku.

Dotiahnutie topánky a ortézy:

- Nohu vložte do topánky tak, aby bola päta úplne vzhru a dole – kontrola v ostenku päty
- Najskôr zatvorte **stredný popruh** a **pevne ho utiahnite** (drží päta v správnej polohe), ostatné popruhy zatvorte voľnejšie.
- Topánku vložte zhora do uzáveru na začiatku a ortézu posuňte dozadu v smere päty, kým čap nezapadne. Na **uvoľnenie** ortézy poťahnite čap, ortézu posuňte na doraz v smere špičky chodidla a nadvihnite.

Topánky nie sú určené na behanie! Nebezpečenstvo pošmyknutia!



semēda[®]
ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... step by step forward

Konformita ECO-Brace Light abdukčnej ortézy na dolné končatiny spoločnosti Sameda je potvrdená značkou CE. Aktuálne znenie vyhlásenia o zhode EÚ si môžete kedykoľvek vyžiadať v spoločnosti Sameda. Vyhlásenie o zhode je pre ortopedických technikov pripravené na stiahnutie vo webovom obchode. Pre ortopedických technikov je k dispozícii vyhlásenie o zhode na stiahnutie na www.semēda.de v sekcii [english/download/technicians](#).

CE



SEMEDA GmbH

Am Petersberg 36
D-29389 Bad Bodenteich
Deutschland/Germany

Tel.: +49-(0)5824 98 555-0
Fax.: +49-(0)5824 98 555-20

Mail: info@sameda.de
Web: www.sameda.de